

## VISOCOLOR® ECO

I kit VISOCOLOR® ECO sono un gruppo di prodotti per analisi colorimetriche e mediante titolazione. Nella prospettiva di una costante diminuzione dei valori limite da non superare imposti dalle normative, VISOCOLOR® ECO permette la valutazione di importanti parametri ambientali con sufficiente accuratezza per intervalli di concentrazione inferiori a quanto possibile in precedenza.

Caratteristiche del VISOCOLOR® ECO:


- Kit analitici per colorimetria o titolazione per basse concentrazioni;
- Facile utilizzo grazie alle istruzioni grafiche;
- Nessun impiego di reagenti tossici;
- Le preparazioni analitiche dopo l'utilizzo possono essere smaltite senza problemi;
- Reagenti sufficienti all'esecuzione di 50 - 400 determinazioni;
- La lettura dei risultati si ottiene in modo semplice spostando il comparatore;
- Ampio intervallo di misura con molti valori confrontabili;
- Utilizzabilità direttamente in campo;
- Possibilità di compensare torbidità e colorazioni.



### Come si usa?




#### Analisi Colorimetrica

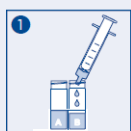

1 Riempire entrambe le provette con il campione d'acqua




2 Aggiungere il reagente

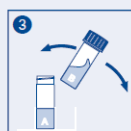

3 Chiudere e agitare




4 Inserire la provetta nel comparatore e far scorrere il comparatore finché si osserva un colore uguale

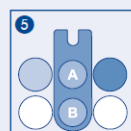


5 Confronta


#### Analisi Volumetrica

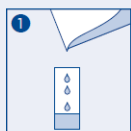


1 Riempire la provetta con il campione d'acqua

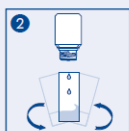

2 Aggiungere l'indicatore ed agitare

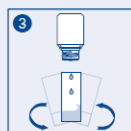

3 Aggiungere la soluzione titolante ed agitare

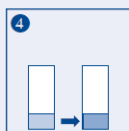

4 ...fino a che l'indicatore non cambia colore

**Semplice**

- Analisi chimica senza ulteriori accessori
- Semplice utilizzo senza la necessità di formazione
- Istruzioni chiare per il dosaggio dei reagenti

**Sicuro**

- Istruzioni grafiche
- Analisi in accordo agli standard internazionali
- Possibilità di compensare torbidità e colore

**Unico**

- Kit analitici di elevata qualità
- Smaltimento dei reagenti usati nel rispetto dell'ambiente

