

ALCOWEIGHT

Bilancia idrostatica Mod. M5

CARATTERISTICHE GENERALI

- L'ampio display a Touch screen consente di selezionare i parametri da analizzare
- Calibrazione automatica programmata con peso interno motorizzato
- Possibilità di verifica e taratura con masse certificate - DKD
- Campo di densità relativa da 0,00 a 2,30 g/cm³
- Precisione di lettura D=0,00001
- Accuratezza: 0,00005
- Ripetibilità: ± 0,00005
- Compensazione della temperatura: 10 - 30 °C
- Termosonda: PT100 1/3 DIN
- Sensibilità: 0,01 °C
- Accuratezza e ripetibilità: ± 0.05 °C
- Lettura: 0,1 °C

LA BILANCIA INCLUDE UN SOFTWARE INTERNO per gestire:

- Titolo alcolometrico volumico: 0-100% V/V
- Lettura densità riportata a 20 °C
- Leggibilità: 0,01% V/V
- Precisione e ripetibilità: 0,02% V/V
- Condizioni di lavoro consigliate tra 10 e 30 °C
- Estratto secco totale da 0,0 a 505,8 gr/l
- Valutazione mosti espressi in: grado Baumè, Babo, Massa Volumica, Alcool probabile
- Archivio dei dati tramite USB

IL SOFTWARE permette inoltre:

- La correzione del volume del pescante sia in acqua distillata che in soluzioni a titolo noto.
- La calibrazione e l'azzeramento della bilancia.
- L'aggiornamento dell'ora, dei minuti, della data, etc...
- La stampa dei dati di lettura
- Creazione di utenti personalizzati



Sistema per la determinazione della Densità, del titolo alcolometrico, estratto secco e valutazione dei mosti secondo i metodi OIV. Ideale per tutti i settori dove è richiesta una misura densimetrica: Produttori di vino, aceti, grappe, liquori, industrie alimentari.

ALCOWEIGHT

Bilancia idrostatica Mod. M5

Sistema per la determinazione della Densità, del titolo alcolometrico, estratto secco e valutazione dei mosti secondo i metodi OIV. Ideale per tutti i settori dove è richiesta una misura densimetrica: Produttori di vino, aceti, grappe, liquori, industrie alimentari.

ACCESSORI INCLUSI:

- N. 2 pescanti da 20 ml (Cod. F11315)
- N. 2 cilindri in vetro a doppia camicia (Cod. F11313)
- Uscita dati USB RS232
- Manuale d'uso

ACCESSORI OPZIONALI:

- Cilindro per misure in continuo
- Stampante tramite RS232
- Dimensioni esterne: 200 x 360 x 480 h mm
- Peso: 5,0 Kg
- Alimentazione: 220V - 50 Hz
- Potenza assorbita: 12 VA
- Costruita secondo le norme vigenti
- Marcatura "CE"



Utilizzo come bilancia semi-analitica (certificato DKD)




Sistema rapido di allineamento cilindro-pescante




Uscita dati tramite USB



Facile accesso ai programmi d'analisi

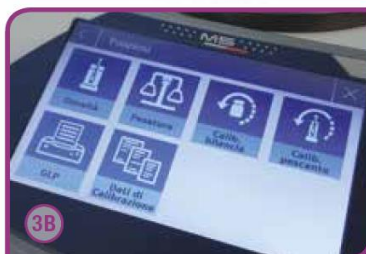

Facile accesso alle funzioni di sistema

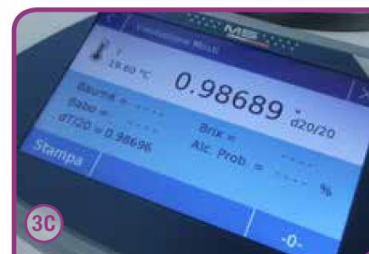

Ampio display touch-screen