

*Super*  
PROJECT



**DISPONIBILE SU TUTTE LE STUFE  
 E GLI INCUBATORI ARGOLAB\***

\*eccetto TCN 30

*Nuova generazione di display a colori touch screen  
 con schermate e icone user friendly  
 8 programmi memorizzabili con 8 step ciascuno  
 registrazione dati su supporto USB con chiavetta in dotazione*



### Tutto a bordo

Display a colori touch screen per la selezione delle diverse funzioni. Tutti i parametri su un'unica schermata: temperatura, velocità ventola, tempo, numero di programma e step, presenza memoria USB, data e ora




### Semplicità d'uso

Impostazione di tutti i parametri di lavoro semplice ed intuitiva grazie ad icone e simboli di facile comprensione. Il display di tipo capacitivo garantisce sensibilità al tocco e precisione anche indossando guanti



### Programmi

Controller professionale dotato di 8 programmi memorizzabili con 8 step ciascuno ed un ulteriore programma di base (PROG 0) a singolo step. Programmazione semplice di tutti gli step di lavoro in un'unica schermata

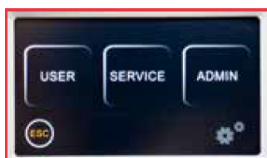

### Sicurezza d'uso

Menu di impostazioni con 3 livelli di accesso: 1 libero e 2 protetti da password per evitare modifiche accidentali ai parametri macchina "sensibili"



### Memorizzazione e download dati

I cicli di lavoro vengono automaticamente memorizzati all'interno dello strumento, sempre disponibili per il download grazie alla porta USB. Con chiavetta USB inserita la registrazione avviene senza limiti di capacità

**USB key connessa** (points to memory icon)  
**Temperatura attuale** (points to 300.0 °C)  
**Velocità ventola** (points to fan icon)  
**Temperatura impostata** (points to SET 300.0°C)  
**Start/Stop** (points to STOP button)  
**Info di lavoro** (points to Delay 0 Cycle -1)  
**Data e ora** (points to 19 Jul 2018 17:11)  
**Timer** (points to 04:55)  
**Tempo impostato** (points to SET 05:00)  
**Programma in corso** (points to STEP 8 PROG 8)  
**Settings** (points to gear icon)  
**Programmazione** (points to PROG button)