

ETA

TAVOLI DA LABORATORIO

BASAMENTO METALLICO MODULARE

Struttura portante con gamba a "C" in tubolare di acciaio decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL7035 (altri colori su richiesta), con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C.

Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico antiacido.




PIANO DI LAVORO IN LAMINATO


Supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore GRIGIO impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore.

Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Spessore 30 mm.


Adatti per l'inserimento dei mobili della serie ETM e ETM00B.

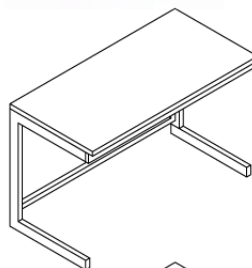


ETA1268 1200 x 600 x h 770 mm
ETA1568 1500 x 600 x h 770 mm
ETA1868 1800 x 600 x h 770 mm

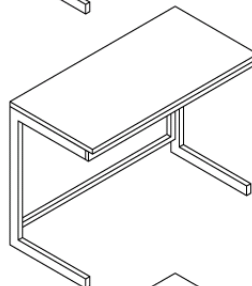

ETA1269 1200 x 600 x h 900 mm
ETA1569 1500 x 600 x h 900 mm
ETA1869 1800 x 600 x h 900 mm

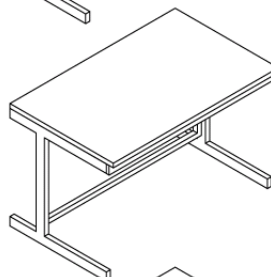

ETA1278 1200 x 750 x h 770 mm
ETA1578 1500 x 750 x h 770 mm
ETA1878 1800 x 750 x h 770 mm

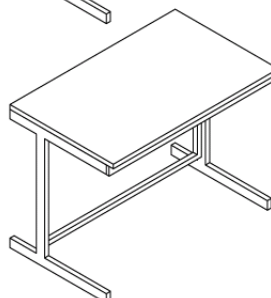

ETA1279 1200 x 750 x h 900 mm
ETA1579 1500 x 750 x h 900 mm
ETA1879 1800 x 750 x h 900 mm

AC1700 SET 4 RUOTE PIROETTANTI (2 CON FRENO)