





# SCUOTITORI

## Scuotitori a movimento lineare e orbitale




F340  
F350  
F355  
F365

-  Il movimento è fornito da un motore a induttanza (esenti da manutenzione) molto silenzioso
-  L'elettronica utilizzata permette di mantenere costante la velocità impostata anche con carichi di diverso peso
-  Il display LCD garantisce un'ottima visuale ed una rapida consultazione
-  Possibilità di programmazione fino a 6 programmi di 10 step

### ESEMPIO DI PROGRAMMA

step	rpm	time
0	102	00:30
1	178	01:05
2	0	00:15
3	20	00:40

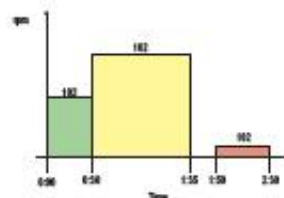

\*Lo strumento non include il support universale

Dati tecnici	F340	F350	F355	F365
Movimento	lineare	orbitale	lineare	orbitale
Piano LxP	350x350	350x350	350x350	350x350
Spostamento asse	10	10	25	25
Programmi	6/10	6/10	6/10	6/10
Velocità variabile	10-300	10-300	10-300	10-300
Timer digitale	00:00 (∞) - 99:59	00:00 (∞) - 99:59	00:00 (∞) - 99:59	00:00 (∞) - 99:59
Carico massimo	10	10	10	10
Dimensioni LxPxH	410x490x140	410x490x140	410x490x140	410x490x140
Peso	20,5	20,5	20,5	20,5
Codice	603.0130.35	603.0130.30	603.0130.25	603.0130.20

VHZ 220/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 30

## ACCESSORI



Piastra di supporto senza molle

Capacità ml	LxP 340x290 posti n°	LXP 600x310 posti n°
100	20	38
250	12	21
500	8	15
1000	4	8
2000	2	5
Codice	603.0131.01	603.0131.02



Molle di fissaggio

Capacità ml	Codice
100	603.0131.75
250	603.0131.76
500/1000	603.0131.77
2000	603.0131.78



Supporto universale per recipienti

N. posti	Imbuti da ml
4	250
3	500
2	1000
Codice	603.0131.00

Dimensioni 340x290x110

Le barre di fissaggio sono regolabili in altezza e lunghezza