

# SCUOTITORI

## Scuotitori a movimento lineare e orbitale



**F340**  
**F350**  
**F355**  
**F365**



Il movimento è fornito da un motore a induttanza (esenti da manutenzione) molto silenzioso



L'elettronica utilizzata permette di mantenere costante la velocità impostata anche con carichi di diverso peso




Il display LCD garantisce un'ottima visuale ed una rapida consultazione



Possibilità di programmazione fino a 6 programmi di 10 step

### ESEMPIO DI PROGRAMMA

step	rpm	time
0	102	00:30
1	178	01:05
2	0	00:15
3	20	00:40

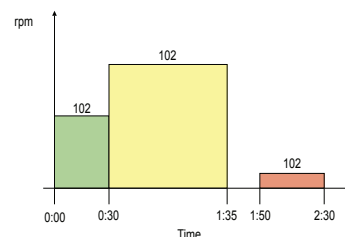


Dati tecnici		F340	F350	F355	F365
Piano LxP	mm	350x350	350x350	350x350	350x350
Spostamento asse	mm	10	10	25	25
Programmi	n/step	6/10	6/10	6/10	6/10
Velocità variabile	colpi/min	10-300	10-300	10-300	10-300
Timer digitale	hh:min	00:00 (∞) - 99:59	00:00 (∞) - 99:59	00:00 (∞) - 99:59	00:00 (∞) - 99:59
Carico massimo	kg	10	10	10	10
Dimensioni LxPxH	mm	410x490x140	410x490x140	410x490x140	410x490x140
Peso	kg	20,5	20,5	20,5	20,5
<b>Codice</b>		<b>603.0130.35</b>	<b>603.0130.30</b>	<b>603.0130.25</b>	<b>603.0130.20</b>

V/HZ 230/50

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 30

## ACCESSORI

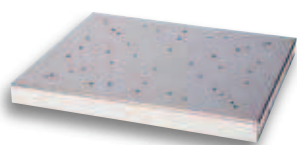


Piastra di supporto senza molle

Capacità ml	LxP 340x290 posti n°	LXP 600x310 posti n°
25 e 50	30	55
100	20	36
250	12	21
500	6	15
1000	4	8
2000	2	5
<b>Codice</b>	<b>603.0131.01</b>	<b>603.0131.02</b>



Molle di fissaggio

Capacità ml	Codice
25	<b>603.0131.03</b>
50/100	<b>603.0131.10</b>
250	<b>603.0131.25</b>
500/1000	<b>603.0131.50</b>
2000	<b>603.0131.70</b>

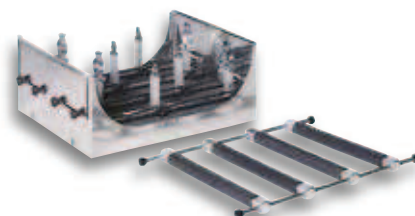

Supporto universale per recipienti

N. posti	Imbuti da ml
4	250
3	500
2	1000
<b>Codice</b>	<b>603.0131.00</b>

Dimensioni 340x290x110

Le barre di fissaggio sono regolabili in altezza e lunghezza