


Pyro - Muffola a microonde

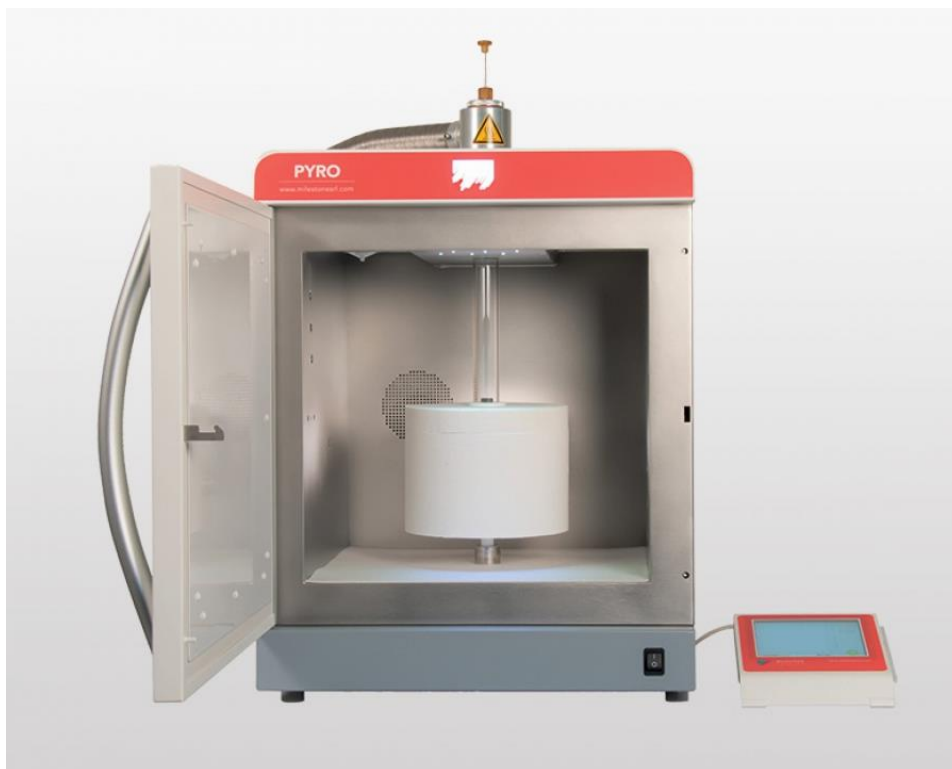

Il sistema a microonde Milestone PYRO è l'unità in grado di automatizzare tutte le operazioni d'incenerimento del campione, ed è un ottimo supporto nel controllo qualità, in tutte le situazioni applicative.

L'esclusivo software di gestione easyCONTROL, integrato con il controllo di Temperatura, offre la possibilità di gestire automaticamente ed in tempo reale il livello di potenza emessa, eseguendo in massima sicurezza e rapidità l'incenerimento d'ogni tipo di campione.

Il programma di gestione easyCONTROL può riprodurre in maniera sistematica e costante tutti i programmi sviluppati e memorizzati, consentendo inoltre l'acquisizione di tutti i parametri operativi e di processo, per la piena rispondenza a tutte procedure di Qualità e GLP. Grazie alla notevole dimensione della cavità di lavoro, poco meno di 3,50 L, è possibile alloggiare fino a 12 capsule del diametro di 40 mm.

La fornace di lavoro, in materiale ceramico poroso, assicura il passaggio di un flusso d'aria fresca che agevola l'incenerimento arricchendo l'ambiente d'ossigeno. Un potente modulo d'aspirazione provvede poi allo smaltimento dei fumi di combustione.

E' la risposta ideale in tutti gli ambiti applicativi, nei settori farmaceutico, analisi materie plastiche e polimeri, alimentare e petrolchimico.