

ORMA Tablet System



espande le possibilità della tua bilancia di precisione...

ORMA Tablet System: un'innovazione nel campo delle bilance di precisione da Laboratorio



Espandi

L'innovativo ORMA Tablet System espande le capacità della tua bilancia di precisione, incrementandone le funzionalità e le applicazioni disponibili.

Connetti

Il tablet utilizza la connessione Bluetooth; basta accendere la bilancia, e il tablet la riconosce automaticamente: non serve alcuna configurazione.

Ciò significa che lo stesso tablet può essere usato con bilance differenti nel tuo Laboratorio.

Il tablet dispone anche della connessione Wi-fi, quindi può essere connesso alla tua rete locale.

Il sistema può essere facilmente aggiornato tramite internet, così come le applicazioni, senza necessità di acquistare una nuova bilancia.

Risparmia

Risparmia spazio: non è necessario collegare la bilancia ad un PC.

Concentra le tue operazioni di pesata in un posto solo.

Risparmia tempo: uso facile e intuitivo attraverso la tecnologia Touch Screen.


Tramite internet, il tablet può richiamare informazioni e dati relativi alle misurazioni/studi che stai effettuando, senza doversi spostare.

Applicazione

Il tablet utilizza la filosofia delle applicazioni: la tua bilancia diventa un sistema di pesatura dipendente dalle applicazioni che scegli.

Puoi acquistare nuove applicazioni nel momento in cui vengono rilasciate senza dover necessariamente acquistare una nuova bilancia o sistema.

La bilancia può sempre lavorare indipendentemente: basta disconnettere il Tablet System.

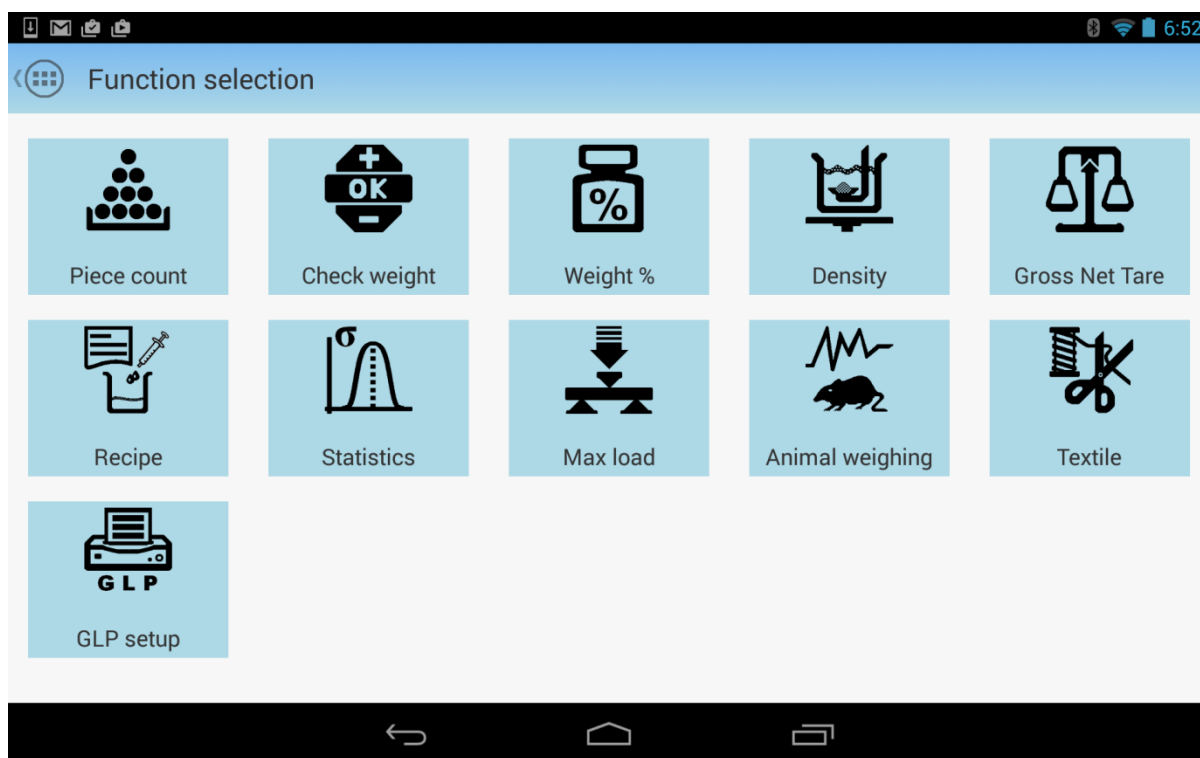

Aggiorna


Il tablet da 7 pollici fornisce un'alternativa economica, potente e salva spazio rispetto a bilance tradizionali più elaborate o sistemi esterni gestiti da PC.

Puoi aggiornare la tua bilancia acquistando ORMA Tablet System anche in un secondo momento, preservando così il tuo investimento.


Nel momento in cui nuove applicazioni vengono sviluppate, puoi scegliere se aggiornare il tuo sistema oppure farci conoscere le applicazioni che vorresti fossero sviluppate per te!



Funzione di pesata

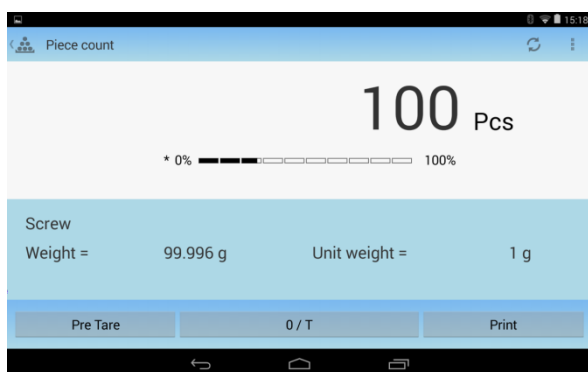

Funzione Contapezzi

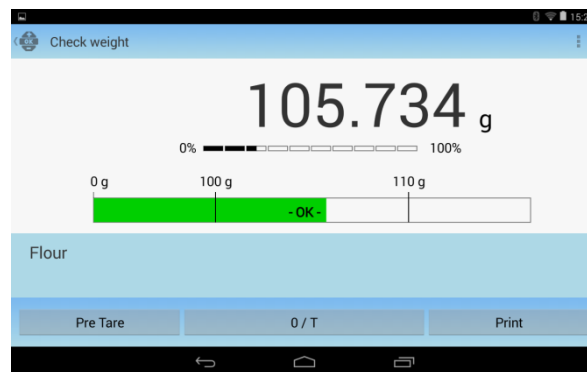

Funzione Soglie

ORMA Tablet System consiste in:

Tablet 7 pollici	<i>Multi-touch, schermo risoluzione 1280x800, Android OS</i>
Tab-Box	<i>Interfaccia di connessione completa di cavi per connettere la bilancia al tablet</i>
APP	<i>Applicazione software per la gestione di tutte le funzioni di peso, già installata nel tablet</i>
Support	<i>Supporto inclinabile per tablet</i>

Funzioni incluse nell'Applicazione:

Pesata semplice	Operazioni di pesata base con unità di misura multiple, calibrazione, pre-tara e funzione di zero/tara
Contapezzi	Funzione contapezzi con campionamento di 10, 25 pezzi, peso medio del campione o da database
Soglie	Setta un valore limite inferiore e superiore di peso: i valori possono essere salvati in memoria
Pesata %	Misura in percentuale della pesata
Densità	Calcolo della densità, anche tramite valori salvati nel database
Lordo Netto Tara	Visualizzazione simultanea del peso lordo, netto e della tara
Formulazione	Dosaggio di componenti multipli contemporaneamente, con ricalcolo automatico del componente in caso di errore nel dosaggio; le formule possono essere salvate e richiamate dalla memoria
Carico massimo	Misura il picco massimo di pesata
Pesata Animale	Pesata di animali di piccola taglia in movimento
Tessile	Determina il titolo del filato attraverso il peso di una matassa di lunghezza nota; unità di misura: Tex, Td, Nm, Nc

Funzioni aggiuntive dell'Applicazione:

Profili	E' possibile creare fino a 10 profili differenti. Ogni profilo ha le proprie impostazioni personalizzate e gestione database
Gestione Database	Ogni profilo può memorizzare 300 voci database per ogni funzione elencata sopra
Backup/Ripristino	In caso di necessità si possono effettuare backup e ripristino del database
Stampanti	Gestione stampanti, configurazione della intestazione da stampare
Bluetooth	Il tablet bluetooth può comunicare con la stampante DPP-250-BT: i dati possono essere stampati senza ausilio di cavi

Accessori:

Stampante wireless Stampante bluetooth wireless; funzionamento anche a batteria. Modello DPP-250-BT

