

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

FIRE BOMB ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI
PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESSI





B 60 G 30

B 120 G 30

ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER BOMBOLE GAS COMPRESSE PER INTERNI



Costruiti completamente in lamiera di acciaio decappato con spessori 1 - 1,5 mm pressopiegata a freddo verniciata con polveri epossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Struttura con rivestimenti smontabili in caso di danneggiamento.

Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (**esente da Fibrocementa**) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio.

Doppia scocca interna con pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Certificazione secondo le norme EN 14470-2, EN 14727.

- **Fermabombole.**
- **Chiusura di sicurezza con chiave.**
- **Sistema di chiusura automatico certificato** (68 °C) dei condotti di uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul cielo armadio, ingresso nella parte bassa per l'estrazione dei vapori/gas pesanti.
- **Cerniere antiscintilla** in ferro naturale con spina in ottone.
- **Guarnizione termodilatante** (DIN 4102).
- **Predisposizione passaggio tubazioni.**
- **Rampa in lamiera richiudibile** per una facile sostituzione bombole.
- **Possibilità di ripiani regolabili** per piccole bombole (**1 compreso**).



ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI GAS PER INTERNO



B 120 X G 90
SEPARAZIONE
COMBURENTI
COMBUSTIBILI



B 60 X G 90

CODICE	G MINUTI	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm	DIMENSIONI INTERNE L x P x A mm	N° BOMBOLE	PESO Kg
B 60 G 30	30	ARMADIO B 60 G 30	595 x 600 x 2050	445 x 420 x 1760	1 - 2	245
B 120 G 30	30	ARMADIO B 120 G 30	1200 x 600 x 2050	1050 x 420 x 1760	3 - 4	420
B 60 X G 90	90	ARMADIO B 60 G 90	595 x 600 x 2050	445 x 420 x 1760	1 - 2	260
B 120 X G 90	90	ARMADIO B 120 G 90 SEPARAZIONE COMBURENTI/COMBUSTIBILI	1200 x 600 x 2050	445 + 445 x 420 x 1760	(1 - 2) + (1 - 2)	520


PANDESA® DEPOSITO PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GAS

DEPOSITO BOMBOLE GAS COMPRESSI CERTIFICATO.

Autorizzazione del Ministero degli Interni. Certificato n° 3804/30/91.


Costruzione con pannelli in acciaio incartato e saldato a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura, completi di piedi regolabili per fissaggio al suolo su basamento in cemento; possibilità di riempire detti pannelli, con sabbia o calcestruzzo, quindi fissati.

- Predisposizione alla modularità.
- Completo di sistema di messa terra continua per singolo pezzo (GABBIA DI FARADAY).
- Foratura per fissaggio moduli.
- Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato fissato su base portante in acciaio verniciato.
- Gronda in PVC.
- Ante con rete antintrusione complete di chiusura di sicurezza.
- Trattamento di zincatura su tutti i componenti.
- Verniciatura con resine poliuretaniche autoestinguenti.
- Possibilità di separare combustibili da comburenti.
- Non necessita di licenza edilizia.
- Varie possibili combinazioni (nella foto il 3 posti bombola).

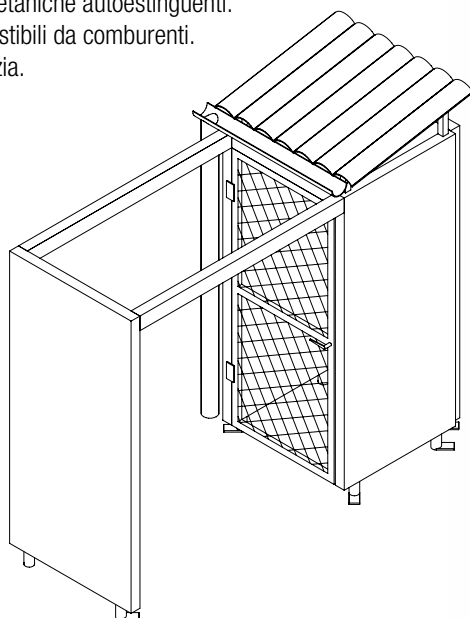


KIT PROTEZIONE PORTE


CODICE	N° PORTE
KPAN01	1 PORTA
KPAN02	2 PORTE

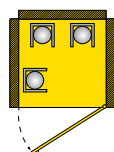


PAN 01
PANDESA 3 posti
L 960 x P 880 x A 2400 mm
Peso: 262 Kg

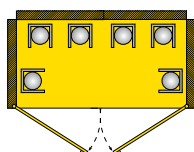


PAN 02
PANDESA 6 posti
L 1760 x P 880 x A 2400 mm
Peso: 377 Kg

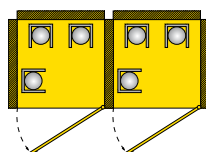


PAN 03
PANDESA 3+3 posti
L 1840 x P 880 x A 2400 mm
Peso: 448 Kg

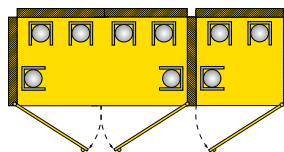


PAN 04
PANDESA 6+3 posti
L 2640 x P 880 x A 2400 mm
Peso: 568 Kg

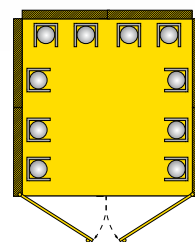


PAN 05
PANDESA 10 posti
L 1760 x P 1680 x A 2400 mm
Peso: 550 Kg

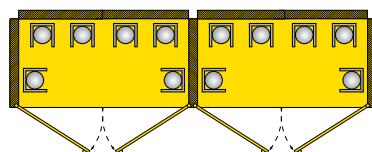

PAN 06
PANDESA 6+6 posti
L 3440 x P 880 x A 2400 mm
Peso: 683 Kg

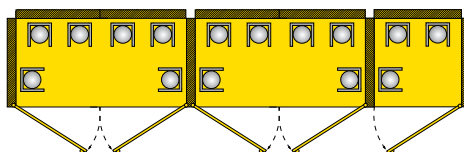

PAN 07
PANDESA 6+6+3 posti
L 4320 x P 880 x A 2400 mm
Peso: 875 Kg

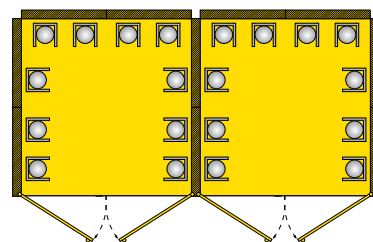

PAN 08
PANDESA 10+10 posti
L 3440 x P 1680 x A 2400 mm
Peso: 909 Kg


DEPOSITO PER STOCCAGGIO BOMBOLE ESTERNO



- Porte a battente con chiusura antintrusione.
- Tettuccio zincato.
- Basamento interno in acciaio mandrolato.
- Aggancio bombole interno con catena e moschettone.
- Predisposto a modularità.
- Etichettatura di sicurezza compresa.




RAMPA CODICE PEDPB

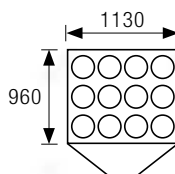


PBOX912 - 9/12 posti

Dimensioni esterne: L 1130 x P 960 x A 2100 mm
Dimensioni interne: L 1065 x P 900 x A 1890 mm
Peso: 175 Kg

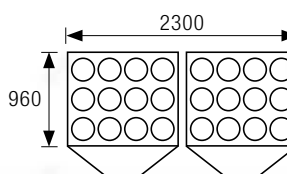

PBOX1824 - 18/24 posti

Dimensioni esterne:
L 2300 x P 960 x A 2100 mm
Dimensioni interne:
L 2130 x P 900 x A 1890 mm
Peso: 350 Kg

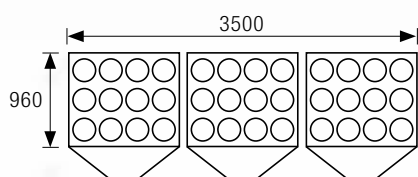

PBOX2436 - 24/36 posti

Dimensioni esterne: L 3500 x P 960 x A 2100 mm
Dimensioni interne: L 3195 x P 900 x A 1890 mm
Peso: 520 Kg



ARMADI PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS PER INTERNI ED ESTERNI

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 15 - 10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico, con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio.

- **Porte reversibili** costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura.
- **Apertura a 110°.**
- **Ante cieche o con finestratura** in policarbonato.
- **Cartelli di sicurezza** che indicano la presenza di bombole di gas compressi.
- **Rampa in lamiera richiudibile** per una facile sostituzione bombole.
- **Catenella ferma bombole** da 50 litri.

BBASIC120



BBASIC60



ARMADI PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS PER INTERNI ED ESTERNI

BBASIC120G



BBASIC60G



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A mm	DIMENSIONI INTERNE L x P x A mm	N° BOMBOLE	PESO Kg
BBASIC60	ARMADIO 1 PORTA CIECA	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	1 - 2	70
BBASIC60G	ARMADIO 1 PORTA PLEXI	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	1 - 2	70
BBASIC120	ARMADIO 2 PORTE CIECHE	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	3 - 4	125
BBASIC120G	ARMADIO 2 PORTE PLEXI	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	3 - 4	125

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

FIRE BOMB

ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI
PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESSE



Rivenditore autorizzato: