

**DISPONIBILE SU TUTTE LE STUFE
 E GLI INCUBATORI ARGOLAB***

*eccetto TCN 30

*Nuova generazione di display a colori touch screen
 con schermate e icone user friendly
 8 programmi memorizzabili con 8 step ciascuno
 registrazione dati su supporto USB con chiavetta in dotazione*




Tutto a bordo

Display a colori touch screen per la selezione delle diverse funzioni. Tutti i parametri su un'unica schermata: temperatura, velocità ventola, tempo, numero di programma e step, presenza memoria USB, data e ora




Semplicità d'uso

Impostazione di tutti i parametri di lavoro semplice ed intuitiva grazie ad icone e simboli di facile comprensione. Il display di tipo capacitivo garantisce sensibilità al tocco e precisione anche indossando guanti

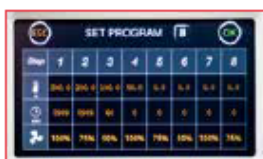

Programmi

Controller professionale dotato di 8 programmi memorizzabili con 8 step ciascuno ed un ulteriore programma di base (PROG 0) a singolo step. Programmazione semplice di tutti gli step di lavoro in un'unica schermata

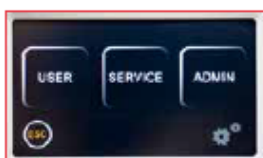


Sicurezza d'uso

Menu di impostazioni con 3 livelli di accesso: 1 libero e 2 protetti da password per evitare modifiche accidentali ai parametri macchina "sensibili"



Memorizzazione e download dati

I cicli di lavoro vengono automaticamente memorizzati all'interno dello strumento, sempre disponibili per il download grazie alla porta USB. Con chiavetta USB inserita la registrazione avviene senza limiti di capacità

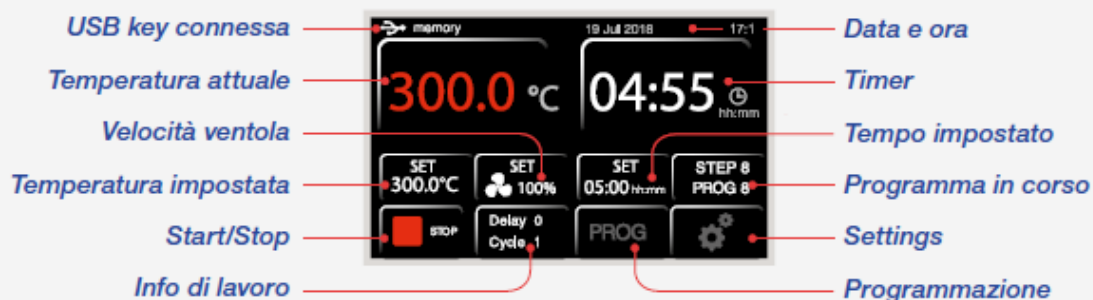

SERIE
Plus

**DISPONIBILE SU TUTTE LE STUFE
 E GLI INCUBATORI ARGOLAB***

*eccetto TCN 30

*Nuova versione di regolatori Serie Plus di tipo Professional
 7 programmi con 10 step ciascuno
 ampio display LCD retroilluminato
 facile impostazione di tutti i parametri di funzionamento*



Tutto in uno

Display LCD retroilluminato con tutti i parametri in un'unica schermata: temperatura reale, temperatura impostata, velocità ventola e programma in corso



Lettura intuitiva

Lettura facilitata dei parametri più importanti, grazie alla distribuzione chiara e logica dei valori numerici, dei simboli e delle icone user friendly



Facile da usare

Il numero limitato di tasti e dei passaggi di impostazione garantisce un'operatività estremamente intuitiva e rapida

