


BILANCIA TECNICA ELETTRONICA ORMA SERIE BC MOD. BC 1200

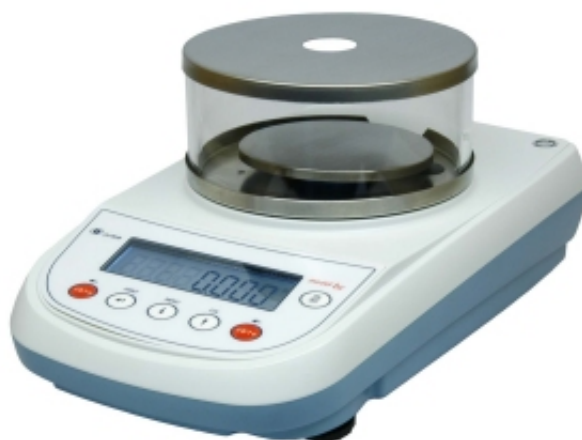

Codice: BC1200

Prodotto di punta ORMA, la serie delle bilance di precisione BC presenta ottime prestazioni e grazie al rapporto qualità prezzo, rende questi strumenti competitivi e versatili sotto ogni aspetto.

Portata: gr 1200

Sensibilità: gr 0,001

Linearità : $\pm 0,003$ g

Riproducibilità : 0,001 g

Ø del piatto di pesata: mm 110

Calibrazione: Esterna

DATI TECNICI

- Display LCD con retroilluminazione ad alta leggibilità e contrasto.
 - Tara automatica sull'intera portata.
 - Unità di peso selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl(hong), tl(Sgp),tl (ROC), momme.
 - Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore per i modelli con lettera finale "S" es.: BC160CS.
 - Calibrazione esterna per i modelli con codice senza la "S" es.: BC160C
 - Sistema di pesata a compensazione elettromagnetica per i modelli senza lettera "C" es. BC720
 - Sistema di pesata a cella di carico ad alta risoluzione per i modelli con lettera "C" es. BC210C
 - Omologazione metrica per i modelli con codice "SM" es.: BC520SM
 - Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per i modelli con sensibilità al milligrammo (0,001g)
 - Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
 - Funzione soglie
 - Pesata in percentuale.
 - Funzione conta-pezzi.
 - Somma pesi.
 - Pesata animale.
 - Funzione carico di rottura.
 - Funzione per densità dei liquidi e dei solidi.
 - Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione)
 - Copertura di protezione in plastica.
 - Interfaccia RS232.
 - Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
 - Temperatura di esercizio +5 - 35 °C
 - Alimentatore di Serie 230V/115 Vac \pm 15% - 50/60Hz.
- CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE CON DISPLAY GRAFICO:
- GLP/ISO record (solo con display grafico cod.: A1-0001)

- Data/ora (solo con display grafico cod.: A1-0001)
- Multi lingue (solo con display grafico cod.: A1-0001)
- Formulazione (solo con display grafico cod.: A1-0001)

DATI TECNICI:

- Dimensione vetrina: in vetro circolare Ø 160x70 mm
- Dimensioni bilancia: 215x345x155(h) mm
- Peso: 4,6 Kg.