


## FLACONE DURAN® YOUTILITY, VETRO CHIARO, DA ML 250

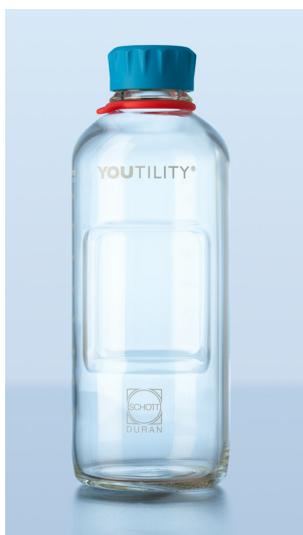

**Codice: 218813653**

- Ø mm 66
- Altezza mm 158.

Zone per presa appositamente disegnata su entrambi i lati delle bottiglie per utilizzo facile e sicuro.

Con la nuova bottiglia YOUTILITY l'apertura o la chiusura a vite è notevolmente più veloce.

Il filetto è completamente compatibile con le chiusure GL 45 ed altri accessori.

La forma più sottile delle bottiglie YOUTILITY consente un utilizzo ottimale dello spazio limitato in autoclave e frigoriferi da laboratorio.

Un'area pre-definita di etichettatura è compatibile con le etichette auto-adesive YOUTILITY appositamente dedicate alle bottiglie DURAN® (disponibili a richiesta).

Il volume nominale è visibile al di sopra della scala graduata di facile lettura, per rapida determinazione dei volumi.

Il corpo della bottiglia di vetro è modellato da vetro collaudato DURAN Borosilicato 3.3 Tipo 1 neutro, che offre elevata resistenza sia chimica che alle alte temperature.

Le bottiglie YOUTILITY hanno un Codice di Rintracciabilità integrato che consente la completa tracciabilità del prodotto. Il certificato di conformità specifico del lotto è disponibile su [www.duran-group.com](http://www.duran-group.com)

Le bottiglie sono disponibili sia in vetro chiaro che ambrato.

Il colore ambrato rispetta le norme USP <660> e i requisiti Eur. Ph. per protezione dalla luce UV.

Ogni bottiglia DURAN® YOUTILITY viene fornita come sistema completo, con un anello salvagoccia (cian-polipropilene) ed un tappo GL 45 (cian-polipropilene).

CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 4 PEZZI.

PREZZO RIFERITO ALLA SINGOLA BOTTIGLIA.