


SISTEMA COMPLETO PER AGITATORE AD ASTA VELP MOD. DLS

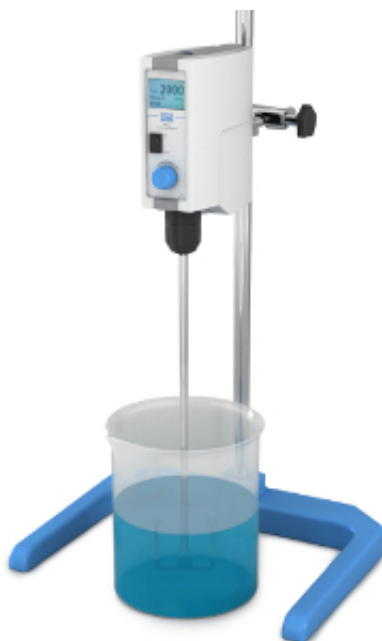

Codice: SA201A0155

Articoli inclusi nel pacchetto:

- F201A0155 Agitatore ad asta DLS 80-260V/50-60Hz
- A00001300 Stativo completo di asta
- A00001301 Morsetto doppio per stativo
- A00001307 Asta di agitazione a elica, inox.

DLS è un agitatore digitale per i liquidi di medio-bassa viscosità.

La struttura in tecnopolimero offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione. Infatti DLS è progettato per resistere nel tempo e garantito per 3 anni.

Semplice da installare, resistente e sicuro, DLS offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo mandrino autobloccante non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni.

Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza.

DLS guida l'utilizzatore attraverso un display estremamente luminoso e di facile lettura. Tutti i principali parametri, tra cui la velocità reale, quella impostata e la coppia, sono costantemente mostrati. Senza dimenticare il timer digitale integrato, programmabile fino a 999:59 minuti, con spegnimento automatico.

DLS vanta anche un sistema di contro-reazione che garantisce velocità costante al variare della viscosità.

DATI TECNICI

- Struttura: tecnopolimero e lega di alluminio con verniciatura epossidica
- Apertura mandrino: 1 - 10 mm
- Indicatore velocità: display LCD
- Grado di protezione CEI EN 60529: IP 40
- Potenza: 120 W
- Peso: 2.5 Kg
- Dimensioni (LxHxP): 80x215x196 mm

PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica dei giri: 50 - 2000 rpm
- Volume max agitabile (H₂O): 25 litri

- Viscosità max: 25000 (mPa*s) mPa.s = 1 centipoise
- Momento torcente max: 40 Ncm
- Temperatura ambiente di utilizzo: 0 - 40°C